

# PLUM



L a v a o j o s

Solo tienes  
**dos ojos** cuídalos!




# Ponga ojo **de lince** en lo que se refiere a seguridad! ¡Unos pocos segundos podrían ser decisivos!

## La vista es uno de nuestros más importantes sentidos.

Cuando se produce un accidente, tan sólo unos pocos segundos pueden decidir si pierde la vista o no. Disponer de un rápido acceso a un lavajojos es decisivo en todos los lugares de trabajo donde exista riesgo de lesionarse los ojos.

Esto no atañe menos las lesiones provocadas por ácidos o sustancias alcalinas; la quemadura cáustica se inicia tan pronto como la sustancia entra en contacto con el ojo.

Pero el tiempo es también importante cuando se trata de lesiones provocadas por virutas de metal y madera, por polvo o suciedad, por ejemplo. En estas situaciones el uso inmediato de un lavajojos puede evitar que cuerpos extraños dañen el ojo y le causen lesiones graves.

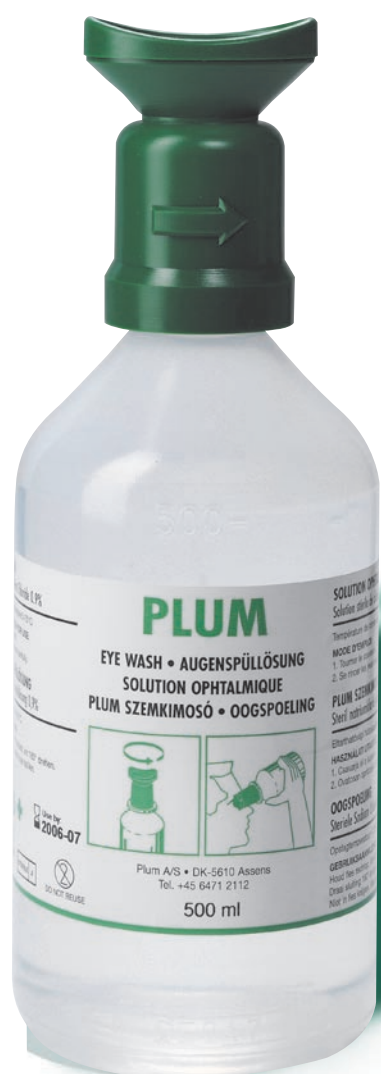

## El Lavajojos PLUM provee una ayuda rápida e higiénica en cualquier situación laboral

- El sistema fue desarrollado para que usted pueda enjuagar sus ojos fácilmente. Dos simples movimientos y la botella está lista para ser usada. El manguito ocular tiene un diseño ergonómico que garantiza un enjuague rápido y directo, alejando el fluido del ojo después de enjuagarlo. Claras instrucciones de uso en las botellas le ayudan a usar el lavajojos correctamente y con seguridad.
- El Lavajojos PLUM contiene una solución estéril de cloruro sódico (0,9%) que corresponde con el fluido natural del ojo. Esta solución enjuaga el ojo cuidadosamente y previene una contaminación posterior. Para lesiones producidas por agentes químicos, recomendamos nuestro pH Neutro, un regulador de fosfato estéril que neutraliza cuidadosa y rápidamente el de líquido en el ojo y restablece el nivel normal del pH del 7,4.
- Una amplia gama de productos le asegura una solución óptima para satisfacer todas las necesidades, e incluye estaciones de diferente tamaño para el montaje en pared en los lugares de trabajo, así como pequeñas unidades para llevar en los vehículos, en la caja de herramientas y en el botiquín de primeros auxilios, o bien en una bolsa especial.

**Simplicidad - seguridad - flexibilidad**

### Lavaojos Plum 500 ml.



Botella con solución estéril al 0,9% de cloruro sódico. Equipada con un manguito ergonómico que se adapta y protege el ojo, una tapa anti suciedad y claras instrucciones de uso. Como recambio de estación o para uso independiente. Caducidad: 3 años.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 5 minutos  
Art. núm. 4603  
Empaquetado: caja de 12 botellas

### Lavaojos Plum Estación con una botella



Estación para montaje sobre pared equipada con 1 x 0,5 litros de Lavaojos Plum, incluido pictograma de uso. Adecuada especialmente para lugares de trabajo donde se requiere un enjuague in situ, para lugares de trabajo en espacios reducidos y lugares de trabajo móviles.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 5 minutos  
Art. núm. 4609  
Empaquetado: 1 unidad

### Lavaojos Plum Estación con dos botellas



Práctica estación lavaojos, de fácil instalación cerca del lugar de trabajo. La estación está equipada con dos botellas, un espejo y claras instrucciones de uso para garantizar un enjuague rápido y correcto en caso de accidentes. No es adecuada para lugares con mucho polvo y suciedad.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 10 minutos  
Art. núm. 4699  
Empaquetado: 1 unidad

### Lavaojos Plum Estación con dos botellas



Estación lavaojos con caja protectora anti suciedad, equipada con 2 x 0,5 litros de Lavaojos Plum. Adecuada especialmente para zonas de producción donde se genera gran cantidad de polvo y suciedad, así como para lugares de trabajo móviles. La estación está equipada con una pegatina con claras instrucciones de uso en la parte delantera y un espejo en el interior de la tapa.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 10 minutos  
Art. núm. 4656  
Empaquetado: 1 unidad

### Lavaojos Plum caja de tres



3 x 0,5 litros de Lavaojos Plum con un manguito ergonómico que se adapta y protege el ojo y una tapa anti suciedad. Práctico embalaje para llevar en mano.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 15 minutos  
Art. núm. 4614  
Empaquetado: 1 unidad

### Lavaojos Plum 200 ml.



Pequeña y práctica botella con una solución estéril al 0,9% de cloruro sódico. La botella es fácil de llevar consigo en un bolso riñonera, o en el botiquín de primeros auxilios. Equipada con un manguito ergonómico que se adapta y protege el ojo, una tapa anti suciedad y pegatina con claras instrucciones de uso. Caducidad: 3 años.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 2 minutos  
Art. núm. 4685  
Empaquetado: caja de 10 botellas

### pH Neutro 200 ml.



Pequeña y práctica botella con una solución reguladora estéril al 4,9% de fosfato, que neutraliza el líquido del ojo después de un accidente con agentes químicos. La botella es fácil de llevar consigo en la riñonera, en el botiquín de primeros auxilios o en la caja de herramientas, etc. También hay disponible un soporte de pared. La botella está equipada con un manguito ergonómico que se adapta y protege el ojo, una tapa anti suciedad y claras instrucciones de uso. Caducidad: 3 años.

Tiempo de autonomía:  
aproximadamente 2 minutos  
Art. núm. 4750  
Empaquetado: caja de 20 botellas

### Bolso riñonera para botellas de 200 ml.



Práctico bolso para ser fijado al cinturón, el mono de trabajo, etc. Fácil de abrir en caso de accidente, protege, además, la botella de manera segura e higiénica.

Art. núm. 4692  
Empaquetado: 10 unidades

### Estación de emergencia de lavado ocular



Estación sujeción pared con 1 botella de 200ml con pH neutral, 1 de 500ml con solución limpiadora de ojos, sujeción pared, espejo y pictogramas integradas. Con set de montaje.

Tiempo de autonomía:  
aprox. 7 minutos  
No artículo: 4771  
Empaquetado: 1 unidad

### Estación de emergencia de lavado ocular en box sujeción pared



Box de sujeción pared, estanca al polvo con 1 botella de 200ml de pH neutral y una de 500ml solución limpiadora de ojos, espejo y pictograma integrado. Incluye set de montaje.

Tiempo de autonomía:  
aprox. 7 minutos  
No artículo: 4788  
Empaquetado: 1 unidad

Un programa flexible



Retirar horizontalmente la botella de la estación.



Girar la tapa hasta que se rompa el sello.



Inclinar la cabeza hacia atrás y enjuagar.

## Importante:

Con cualquier tipo de lesiones, el líquido debe aplicarse al ojo cuidadosamente y con un flujo constante. Presione ligeramente la botella, sin estrujarla. Solicite siempre ayuda médica y continúe enjuagando durante el traslado.



En el caso de cuerpos extraños en el ojo, puede ser conveniente inclinar la cabeza hacia adelante y enjuagar.

# PLUM

Plum A/S  
 Frederik Plums Vej 2  
 DK-5610 Assens  
 Tel. +45 6471 2112  
 Fax +45 6471 2125  
 info@plum.dk  
 www.plum.dk

GEPROPLUS 2006, S. L  
 C/Camilo José Cela, 32  
 E-19200 Azuqueca de Henares  
 Tel.: +34 949 26 02 81  
 Fax: +34 949 26 46 94  
 geproplus@geproplus.com  
 www. geproplus.com

### Instrucciones para enjuagar diferentes tipos de lesiones

Lesiones por cuerpos extraños  
 (polvo, suciedad, virutas de metal y madera)

Enjuagar con el Lavaojos Plum hasta que se haya expulsado el cuerpo extraño.

Ácidos

Enjuagar aproximadamente dos minutos con pH Neutro y continuar enjuagando con Lavaojos Plum hasta que desaparezcan las molestias o llegue el médico.

Sustancias alcalinas

Enjuagar aproximadamente dos minutos con pH Neutro y continuar enjuagando con Lavaojos Plum hasta que llegue el médico.

Otras lesiones con agentes químicos

Enjuagar con Lavaojos Plum hasta que desaparezcan las molestias o llegue el médico.